



地球集团
GLOBE INTERNATIONAL



Potec

PR-5000/PRK-5000

波特电脑验光/角膜曲率仪

三大优点

- 准确可靠：测量范围宽，使用方便
- 以人为本：符合人体工程学的外形，以人为本的设计
- 高性价比：功能齐全，性能优越的RK产品


三大功能

- 屈光度和角膜曲率测量
- 隐形眼镜基弧（CLBC）测量
- 角膜、瞳孔或者硬性隐形眼镜的直径测量


最优化的设计

- 操作面板：
集中式按键设计，充分考虑了操作者的使用习惯
- 操纵杆：
操纵杆集对焦虑和测量操作于一身，单手即可完成操作过程
- 打印机：
内置式热敏打印机
- 数据传输：
测量结果可通过RS-232接口传至其它外接设备


波特，电脑验光界后起之秀

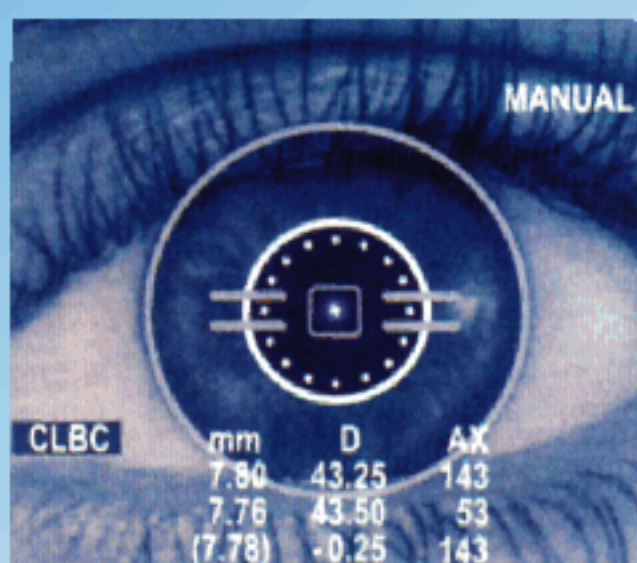

隐形眼镜基弧 (CLBC) 测量
用隐形眼镜测量支座可测量硬性隐形眼镜的基弧，亦可用来检查该隐形眼镜。

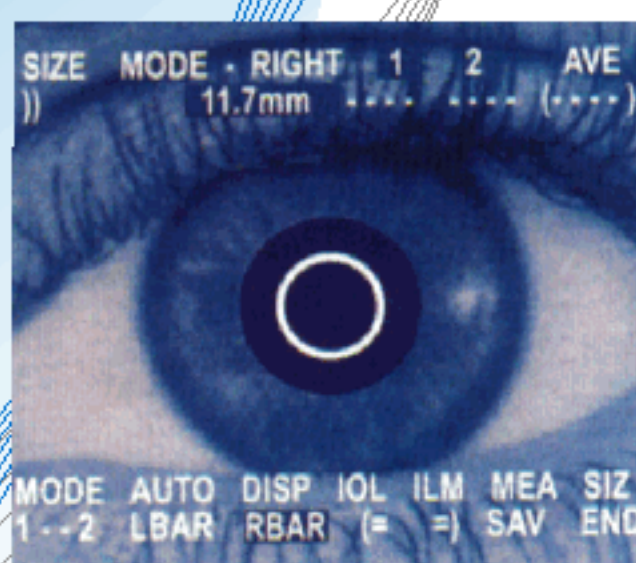

直径测量
利用POTEC PRK-5000的图像固定功能，可以测量角膜、瞳孔或者硬性隐形眼镜的直径，而且操作简便，结果准确。

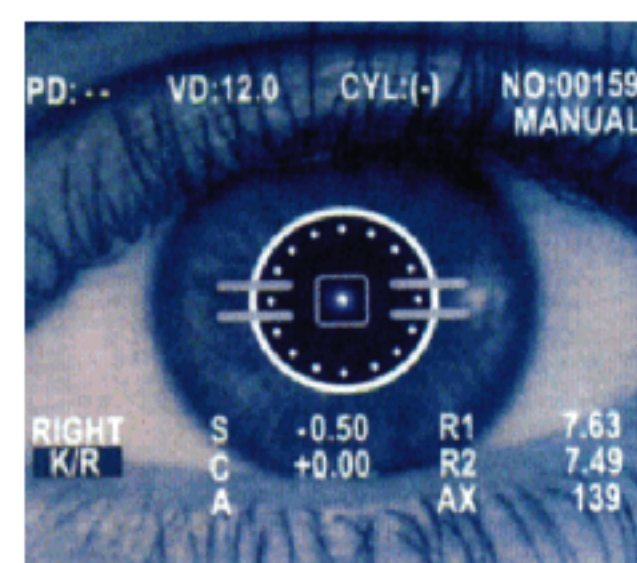

屈光度和角膜曲率测量
POTEC PRK-5000提供了宽广的测量范围，友好的操作方式。

验光结果显示

自动瞳距测量


当测量完成后瞳孔距离也自动完成，并将结果显示于屏幕上。

自动节电模式

长时间不操作机器，节电模式自动启动并进入待机状态，延长使用寿命。

广角彩色视标

广角彩色视标的运用使得被检者的眼睛更放松；自动雾视功能减少了顾客自适应调节对测量结果的影响，尤其有助于对儿童和复杂光度者进行验光。

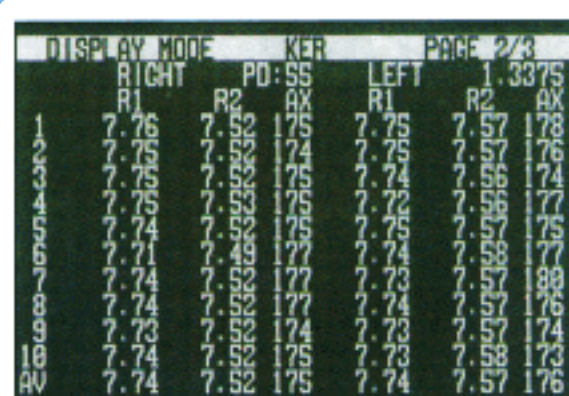

验光结果显示



广角彩色视标

规格参数

测量模式

K/R、REF、KER、CLBC

屈光度测量参数

镜角距离 (VD)	0, 12.0, 13.5
球镜范围 (SPH)	-25.00~+22.00
散光范围 (CYL)	0.00~10.00
散光轴位 (AX)	1~180°
散光表示方式 (K/R)	-, +, MIX
瞳孔距离 (PD)	10~85mm
最小瞳孔直径 (K/R)	2.0mm

角膜曲率测量

曲率半径	5.0~10.2mm
角膜屈光度	33.00~67.50 (n=1.3375)
角膜散光	0.00~15.00D



香港
电话: (852)-2332-5686
传真: (852)-2780-6281

广州
电话: (020)-8101-9407
传真: (020)-8101-9571

北京
电话: (010)-6730-0699
传真: (010)-6730-9488

上海
电话: (021)-5108-9979
传真: (021)-5108-8836

武汉
电话: (027)-8549-0541
传真: (027)-8556-0325

成都
电话: (028)-8627-0048
传真: (028)-8668-2773

西安
电话: (029)-8325-7377
传真: (029)-8325-7377

沈阳
电话: (0511)-657-9375
传真: (0511)-656-6959

沈阳
电话: (024)-2281-6105
传真: (024)-2281-6105